


蓝海灵豚医疗器械管理软件

自动备份



安装、设置操作指南



沈阳蓝海灵豚软件技术有限公司

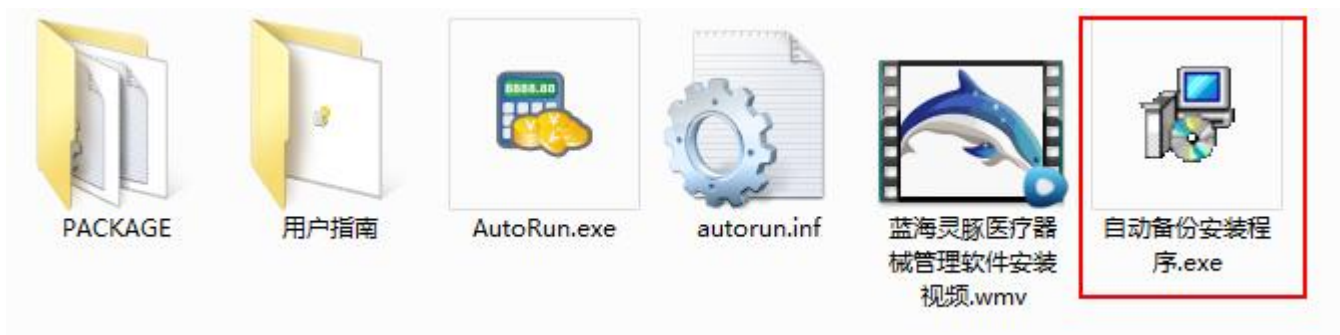

打开安装包，双击运行“自动备份安装程序.exe”



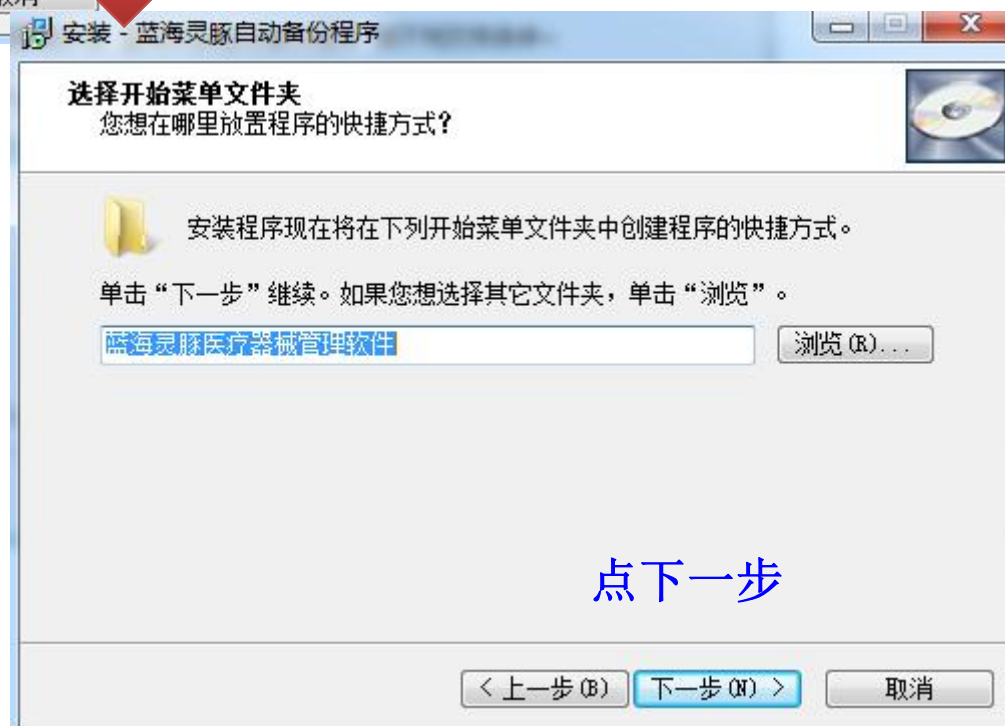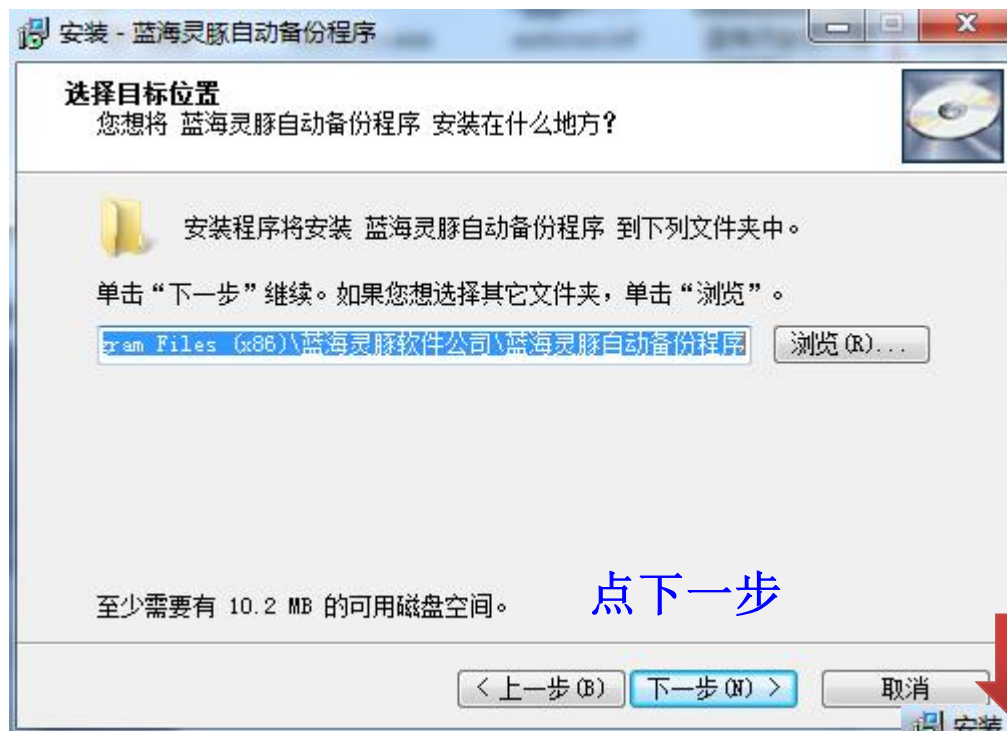

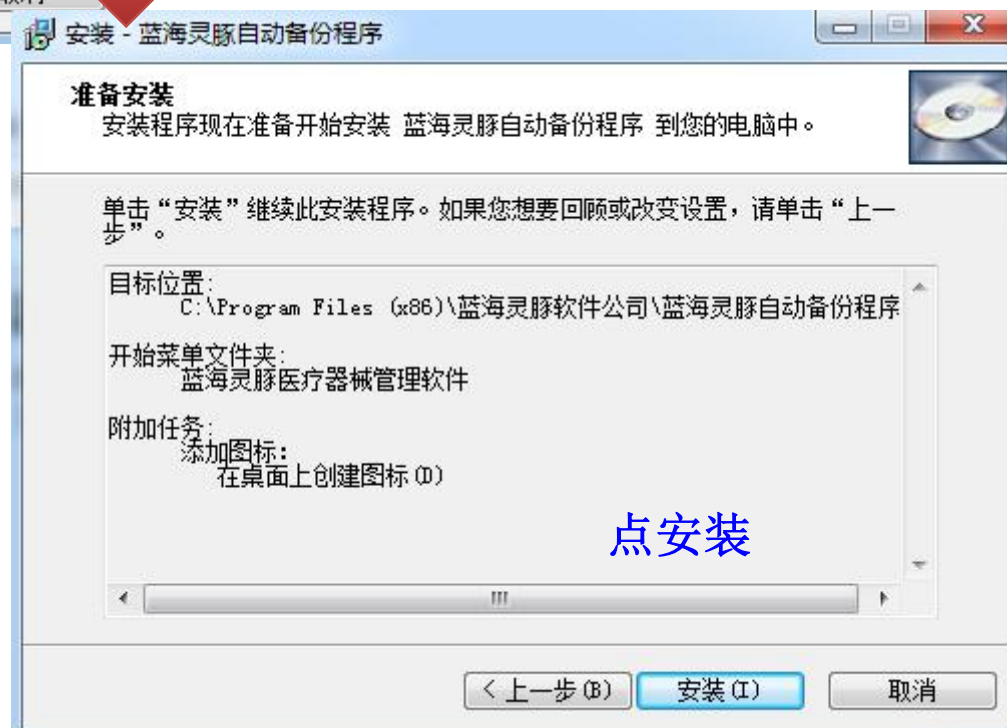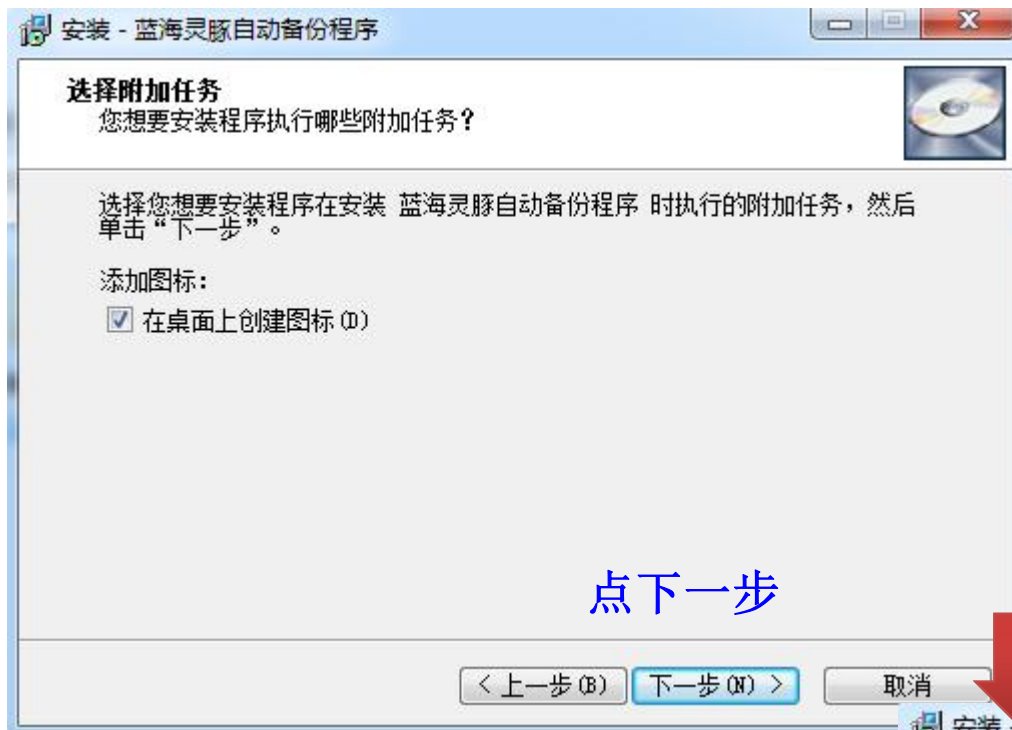



1、点“完成”后，桌面会生成快捷方式图标“



”。

2、双击此图标，程序自动落在显示器右下角任务栏中。以后每次开机即会自动启动。




点击此图标，弹出自动备份设置窗口。



备份周期： 点击下拉键，按自己的管理需要选择“每天”或“每周”或“每月”的备份周期。

建议： 数据量大，选每天；数据量小，选每周或每月。

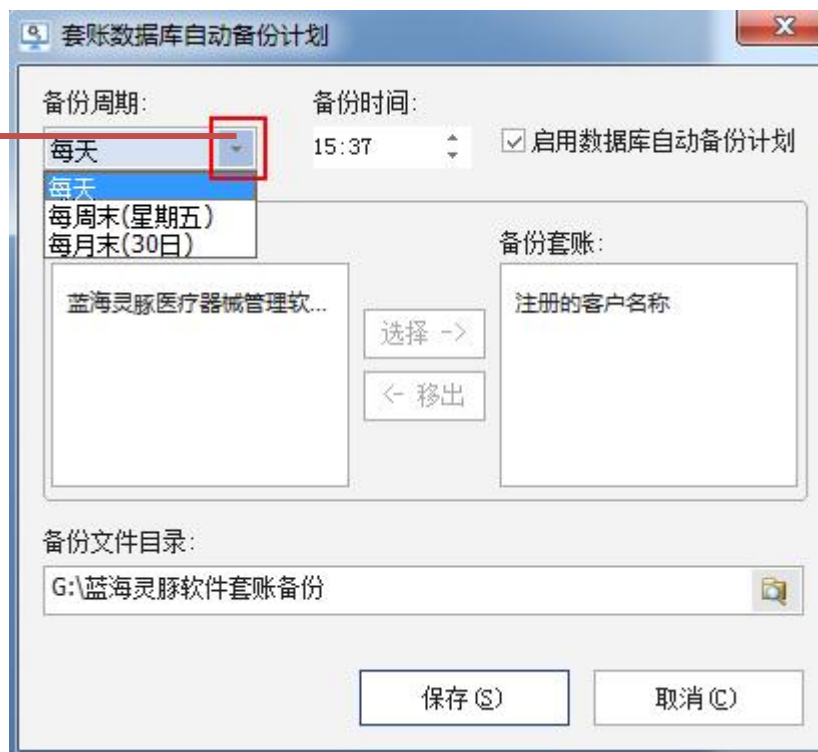

备份时间： 点击上、下箭头选择具体的备份时间。

建议： 每个周期下班前。

套账数据库自动备份计划

备份周期： 每天

备份时间： 15:37

启用数据库自动备份计划

套账选择

当前套账： 蓝海灵脉医疗器械管理软...

备份套账： 注册的客户名称

选择 ->

< 移出

备份文件目录： H:\2015产品验收\5.9.0.0隐形眼镜专版验收

保存(S) 取消(C)

套账数据库自动备份计划

备份周期： 每天

备份时间： 15:37

启用数据库自动备份计划

套账选择

当前套账： 蓝海灵脉医疗器械管理软...

备份套账： 注册的客户名称


选择 ->

< 移出

备份文件目录： H:\2015产品验收\5.9.0.0隐形眼镜专版验收

保存(S) 取消(C)

此项为默认勾选。不能将勾选选项去掉。

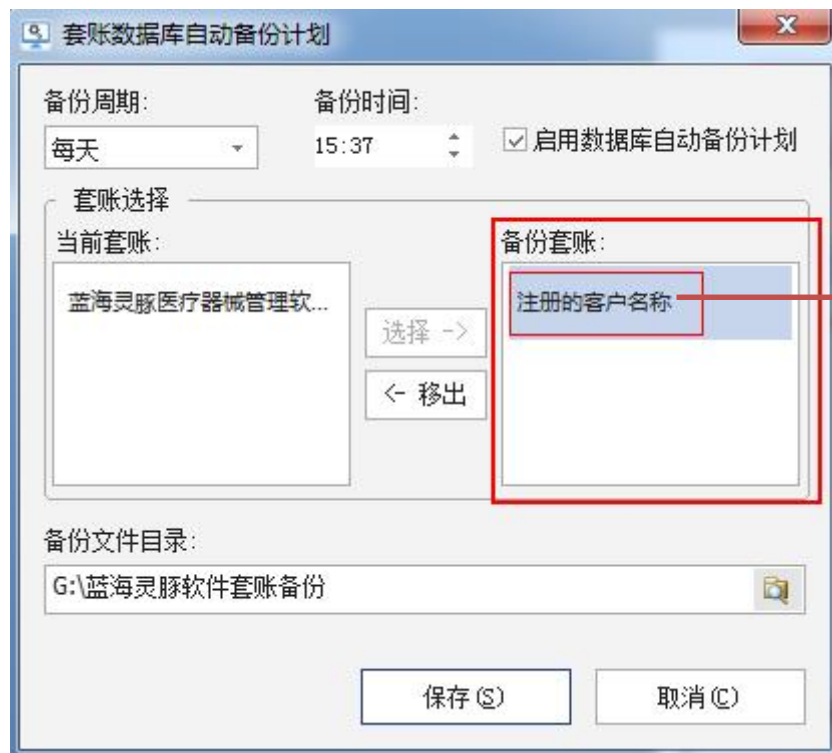

备份套账：此栏中的套账名称，表示要按上面所设置的“备份周期”按时自动备份的套账。


注意：如此栏是空的，说明没有任何套账按周期备份。



当前套账： 此栏记录用户所有的套账名称。


点中“蓝海灵豚医疗管理软...”这套账名——点“选择”按钮——将此套账选进“备份套账：”栏中。表示要按上面所设置的“备份周期”按时自动备份“蓝海灵豚医疗管理软...”这套账。

移出：表示，将“备份套账”栏中所点中的套账，移到“当前套账”栏中。移出后的套账将不会被自动备份。

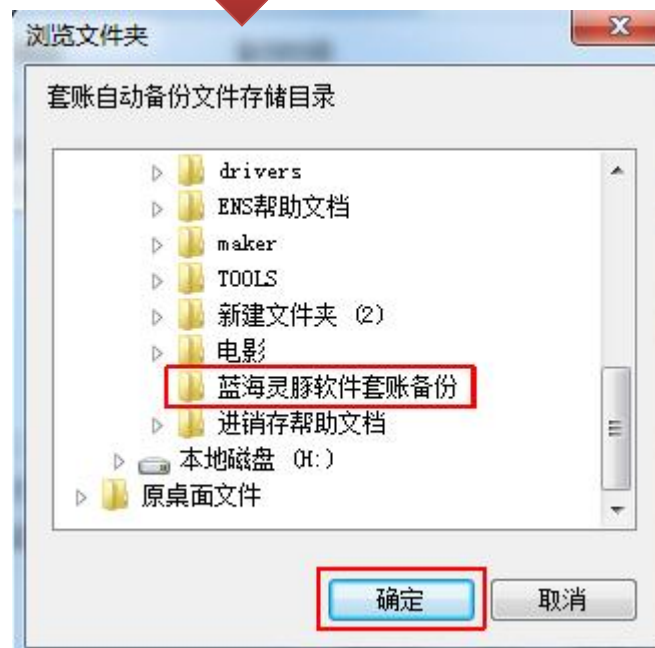

备份文件目录： 将所生成的备份文件存放的路径位置。用户可以根据自己的想法建立备份位置。

注意： 不要将备份文件目录 设置在系统盘中。如果系统损坏，将找不到备份文件。

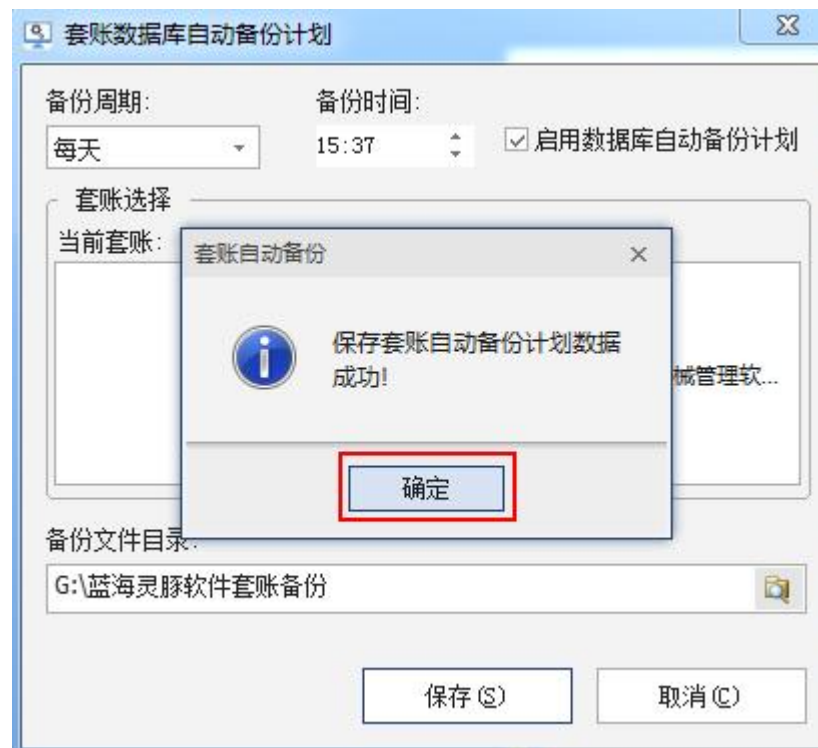

保存：点“保存”系统提示“保存套账自动备份计划数据成功”后，“确定”。设置窗口会自动落在显示器右下角任务栏中。以后每次开机即会自动启动。

以上设置结果即：在“每天”的“15:37分”，系统会启动计划，将“注册的客户名称”和“蓝海灵豚医疗器械软件...”两个套账数据备份在“G:\蓝海灵豚软件套账备份”这个位置路径中。

自动备份应用注意事项：

- 1、建议安装软件后，就安装“自动备份程序”。新建套账后，就进行自动备份设置。
- 2、备份周期、备份时间、备份文件目录：可以随时进行修改。修改后需点“保存”设置保存。其中“备份文件目录”选择好后，请不要移动或删除所选择路径。否则不会正常备份，会报错。
- 3、因计算机系统的不稳定性，建议时常查看“自动备份”程序每天开机后是否自动启动在“显示器右下角任务栏中”。如没有自动启动，需重新安装，重新设置。
- 4、因人为因素的不可控性，建议时常查看“备份套账”栏中是否空了，即没有要备份的套账名称。如发现需及时从“当前套账”栏中，点中要备份的套账名称“选择”进“备份套账”栏中。并点“保存”设置保存。
- 5、系统提供了“手动备份”功能。建议定期做“手动备份”。（具体操作请查看视频教程）。
- 6、建议准备移动设置，将备份文件拷至移动设置中。以免系统完全不能启动时可用。
- 7、备份原理是完全备份，每次备份都是从最初至备份截止时的数据状态。原则上最后一个备份文件是最全的备份数据。
- 8、无论是“自动备份”还是“手动备份”，所生成的文件均为“.bak”文件。不能打开，通常不会用到，保存好即可。如遇到机器问题，软件需要重新安装的情况，重新安装后，可以通过“蓝海灵豚器械管理——系统管理”进行“引用”恢复。

谢谢观赏！

客服热线：024-23255353

医疗器械管理软件首页：

<http://www.bosdsoft.com/zhuanlan/yaoxie/index.html>