

蓝海灵豚医疗器械管理软件

通用-增强版

安装初始化操作指南



**收到产品后，应该怎么办？**



您需要通过**邮件**形式，查收以下安装文件：

- 1、蓝海灵豚医疗器械管理软件安装包\*\*\*
- 2、正式许可文件\*\*\*
- 3、安装初始化指南





## 产品安装文件

是软件安装必备。所以**第一步**您需要将安装文件从**邮件**中下载在硬盘相关路径中。

(建议保存在C盘系统盘，以外的盘符下。并将压缩格式解压后进行安装)。

## 第二步：软件产品安装

### 常见问题1

在开始安装软件前，请确认操作系统是否为“家庭版”。如操作系统是“家庭版”，软件数据库不能安装成功。

查看方法：

WIN7：右键“计算机”——“属性”——查看版本。

WIN8：开始界面——点击“桌面”——右键“计算机”——“属性”——  
查看版本。

WIN10：右键“此电脑”——“属性”——查看版本。

## 第二步：软件产品安装

双击《蓝海灵豚医疗器械管理软件安装包》

- 1、双击“AutoRun.exe”执行软件产品安装。
- 2、双击“自动备份安装程序”执行安装。



# 第二步：软件产品安装



单机版用户点此—  
开始向导安装

单机版安装

网络版安装

网络版用户点此

退出

增强版 5.9.12.202

服务器机器点此—开始安装  
注：只允许一台机器为服务器


服务器端安装

客户端安装

客户端机器点此—开始  
按向导顺序安装

## 第二步：软件产品安装

### 常见问题2

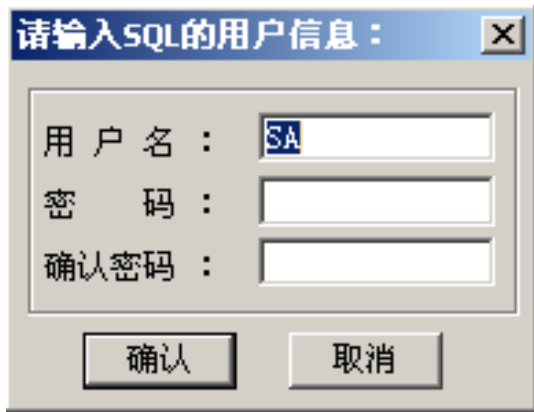

安装开始，弹出此窗口。说明：

此台计算机系统中已安装SQL数据库。录入正确的“密码”、“确认密码”，即可通过验证继续安装。


**注：密码和确认密码是一个。**

遇此提示，通常是计算机系统中，其他软件也用到了SQL数据库。如知道是哪个软件用到，可通过询问该软件的售后得到密码。如不知道是哪个软件用到，即不能录入正确的密码。将不能完成安装，建议更换电脑安装蓝海灵豚软件。



## 第二步：软件产品安装

### 常见问题3

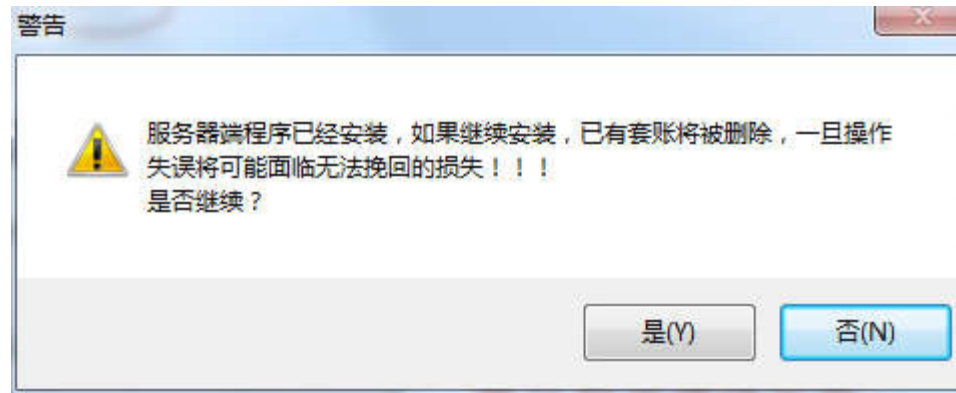

### 安装开始，弹出此提示。说明：

此台计算机系统中曾经安装过“蓝海灵豚软件”。遇此提示，需要您判断是否做过备份操作。或者是否以前数据决定不再保留。如确认，点击“是”，继续安装软件。以前数据不会再找到。如不确认，点击“否”停止安装。请更换电脑安装蓝海灵豚软件。

## 第二步：软件产品安装

排除以上3个常见问题。软件即会按步骤顺利安装。只需耐心等待，以及点击下一步完成安装。

The screenshot displays a software installation progress window with two main sections: '本机环境' (Local Environment) and '安装步骤' (Installation Steps).

**本机环境 (Local Environment):**

- Windows版本: Windows 7 (6.1.7601)
- MS 数据库: SQL Server 2000
- 可用磁盘空间:

盘符	可用空间
C盘	24.43G
D盘	21.02G
E盘	23.63G
F盘	16.84G
G盘	55.94G
H盘	165.79G

**数据库实例 (Database Instance):** 默认实例

**安装步骤 (Installation Steps):**

- ✓ 第一步 .NET FRAMEWORK2.0插件安装
- ✓ 第二步 数据库引擎安装
- ✓ 第三步 服务器端程序安装
- ✓ 第四步 许可服务安装 (提示: 杀毒软件可能会出现病毒提示, 请点击允许放心使用!)
- ✓ 第五步 客户端程序安装


祝贺您, 已经成功完成了软件的安装!

## 第二步：软件产品安装

软件安装后，在桌面生成三个软件快捷方式



**许可管理：**导入正式许可，启动服务相关功能快捷登录。网络版在服务器端安装并显示。

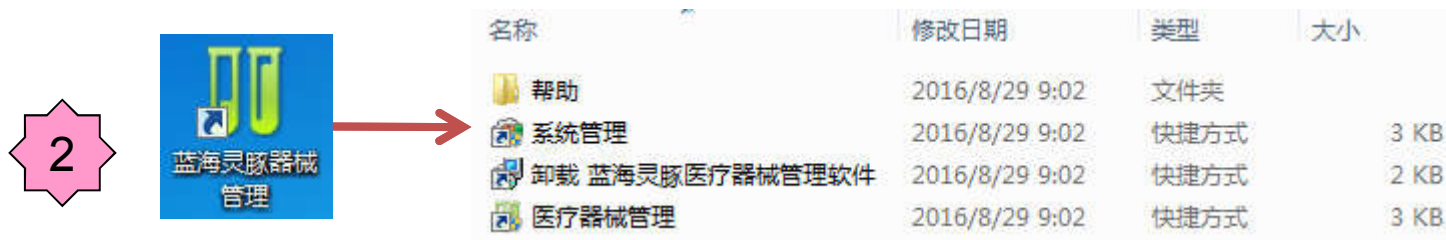

**器械管理：**软件日常应用相关功能快捷登录。网络版在客户端安装显示。




**自动备份：**自动备份配置程序快捷登录。网络版在服务器端安装并显示。

1




名称	修改日期	类型	大小
服务配置	2016/8/29 9:01	快捷方式	3 KB
许可导入	2016/8/29 9:01	快捷方式	3 KB
许可服务卸载	2016/8/29 9:01	快捷方式	2 KB
许可配置	2016/8/29 9:01	快捷方式	2 KB

2

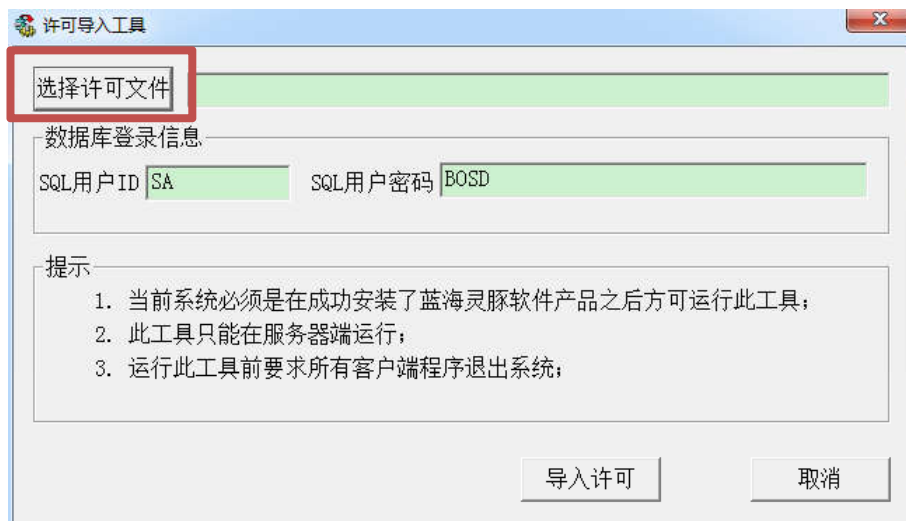

3

4

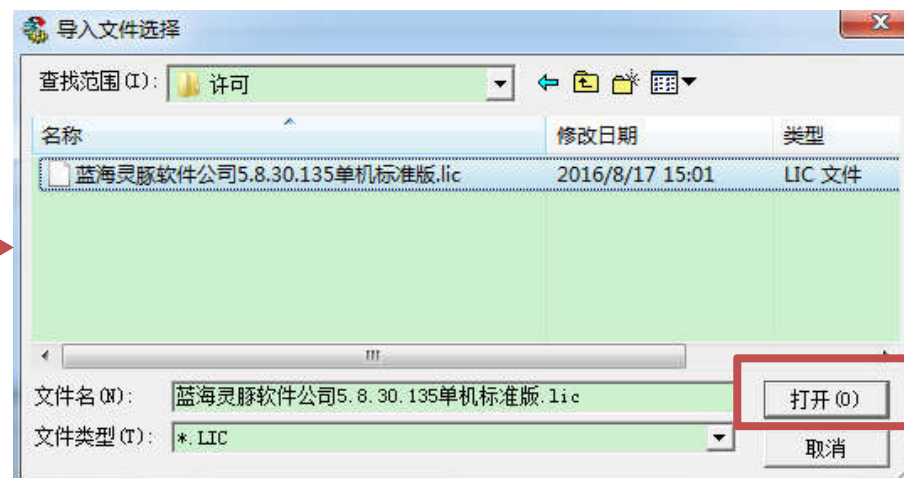

## 第三步：正式许可导入



## 第三步：正式许可导入



1

2

创建新套帐

套帐名称  套帐名称最多可录入32个汉字!

单位名称  单据打印输出时将输出企业名称信息!

建账日期  应用软件开始时间。

主管信息

姓名  姓名最多可录入10个汉字!

代码  代码最多可录入8个半角字符!

登录口令  登录口令最多可录入12个半角

确认口令

以上信息录好后,点击

支持多套账,区别各套账的名称。可与单位名称一致。

许可注册名称。不可编辑。

应用软件开始时间。

登录软件操作员姓名。

系统预置登录代码。不可编辑。需要记住。

登录软件“用户口令”。“登录口令”与“确认口令”要一致。字母或数字都可以。

## 第四步：新建套账

## 第四步：新建套账



**期初账：**指创建套账时，仓库是否有商品库存数量。如果有，在“期初账”中录入保存后。执行“期初账确认”操作开始日常业务录入。如果没有，直接进行“期初账确认”操作开始日常业务录入。

创建套账成功后，自动进入软件。

## 第五步：基础信息建立

**初始数据录入向导页：**按向导箭头方向录入单位基础资料。具体录入操作参照“演示操作视频——基础信息建立”。

• **系统预置信息：**部门、行业、地区、仓库。可以双击预置信息，进行“修改”；可以点击“添加”按钮，新增信息。其中“行业”中预置信息不建议修改。

• **往来单位：**根据实际业务添加。设置时需选择所属“行业”和“地区”。

• **商品与存货分类编码：**根据实际业务将所经营商品有效的进行分类设置。

• **商品与存货编码：**根据实际业务将所经营商品进行录入。设置时需选择所属“类别”。

**注：**各基础信息设置时，带“\*”号项为必填项。



## 初始化导航

# 第五步：基础信息建立



注：执行“期初账确认”后，初始化导航页面隐藏，期初账不允许再修改编辑。进入日常业务操作界面。


# 自动备份配置

1




双击自动备份快捷登录后，程序自动进入任务栏，以后每次开机即会自动启动。

2

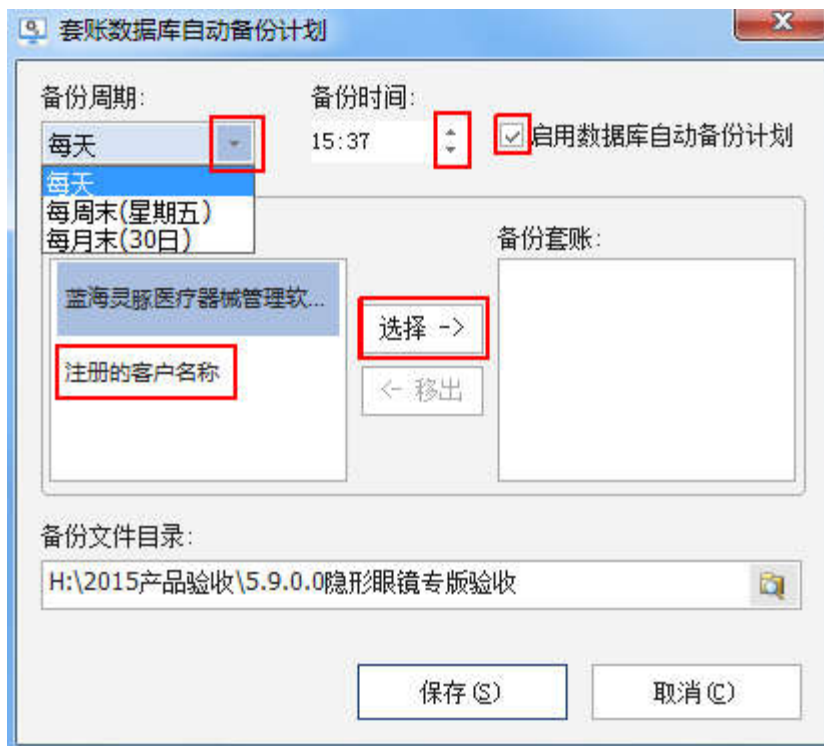

3

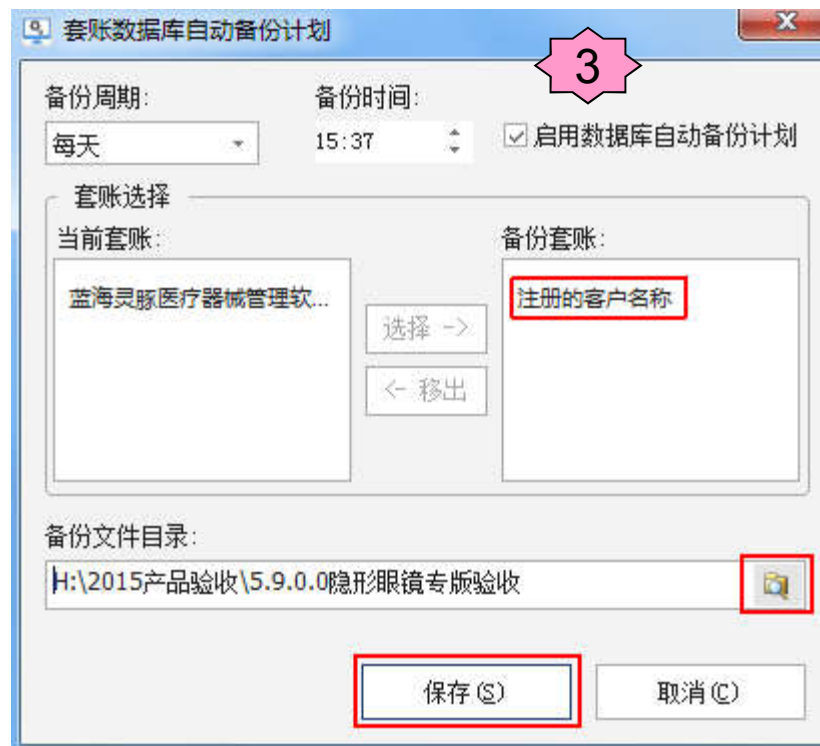

配置保存后，每天自动启动程序，并按配置时间自动将所生成的备份文件存放在备份路径中。

# 日常业务操作界面

蓝海灵医药器械管理软件(增强版) 授权用户: 增强版验收

系统(M) 设置(S) 采购管理(P) 仓库管理(W) 销售管理(V) 质量管理(G) 期末处理(E) 账表(R) 药监数据上传(U) 窗口(W) 帮助(H)

往来单位 商品信息 仓库编码 部门信息 人员信息 销售员档案 变更日志 帮助中心

**采购业务流程**

进货退货流程

销售业务流程

销售退回流程

仓库管理

借货管理

质量管理

期末处理

预警

- ◆ 产品注册证\备案凭证号效期预警 - 2条记录
- ◆ 供货\购货单位资质效期预警 - 1条记录
- ◆ 供货\购货单位委托人授权效期预警 - 0条记录
- ◆ 供货\购货单位营业执照效期预警 - 0条记录
- ◆ 供货\购货单位质保协议效期预警 - 0条记录
- ◆ 生产企业许可证效期预警 - 0条记录
- ◆ 产品保质期预警 - 1条记录
- ◆ 库存量预警 - 0条记录

采购汇总表 采购明细表 采购合同明细表 商品采购趋势图表 采购应付款明细表 采购应付款汇总表


供货者首营审批 首营品种审批

采购合同 采购(收货)单 采购收货 试剂验收 器械验收 采购入库 采购发票 采购付款

拒收流程

点击各业务流程，根据实际业务，按流程图箭头方向进行日常操作。

# 预警中心

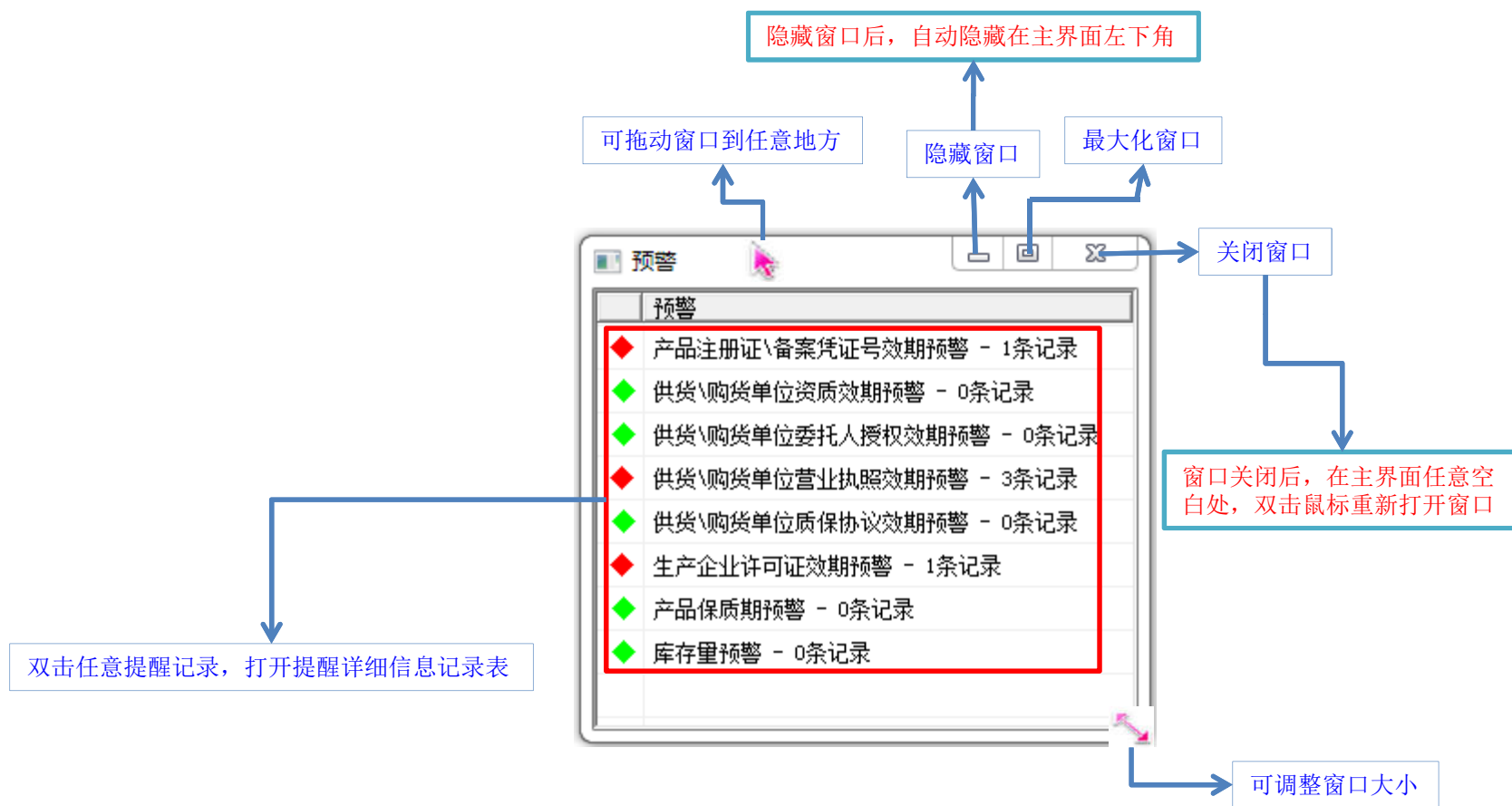

# 在线升级



在软件使用过程中，可点击“帮助—在线升级”可自动下载升级包。点“确定”后，系统自动下载、安装升级。升级后，自动跳转至登录页面，重新登录应用软件系统。

# 帮助中心

蓝海灵医疗器械管理软件(增强版) 授权用户: 增强版验收

系统(M) 设置(S) 采购管理(P) 仓库管理(W) 销售管理(V) 质量管理(G) 期末处理(E) 账表(R) 药监数据上传(U) 窗口(W) 帮助(H)

往来单位 商品信息 仓库编码 部门信息 人员信息 销售员档案 变更日志 帮助中心

遇到困难先点我

采购业务流程

进货退货流程

销售业务流程

销售退回流程

仓库管理

借货管理

质量管理

期末处理

采购汇总表 采购明细表 采购合同明细表 商品采购趋势图表 采购应付款明细表 采购应付款汇总表

供货者首营审批 首营品种审批

采购合同 采购(收货)单 采购收货

试剂验收 器械验收

采购入库 采购发票 采购付款

拒收流程

利用好“帮助中心”可以使您的工作事半功倍。



点击直接进入新的“蓝海灵豚软件客户服务平台”。

<http://service.bosdsoft.com/VideoTutorials.aspx?iProductID=3>

平台中提供更全面的产品操作视频、操作手册、常见问题。使用户应用软件过程中得到更多的帮助。

视频教程    操作手册    常见问题    下载中心    服务公告    客户反馈    查找

- 安装
- 系统初始化
- 基础设置
- 系统管理
- 采购管理
- 销售管理
- 仓库管理
- 常用操作
- 常见问题
- 财务接口

 导入基础编码 导入基础编码 1'32" 播放    下载	 期初账导入 期初账导入 2'54" 播放    下载	 期初帐 期初帐 46" 播放    下载
 商品基础编码导入 商品基础编码导入 4'20" 播放    下载	 商品与存货分类, 商品与存货 商品与存货分类,商品与存货 1'59" 播放    下载	 往来单位 往来单位 51" 播放    下载

# 谢谢观赏！

客服热线：024-23255353

医疗器械管理软件首页：

<http://www.bosdsoft.com/zhuanlan/yaoxie/index.html>