

## 网络版医疗器械管理软件服务器及客户端电脑设置指南

(本指南应可适用于大多数客户的电脑设置，如有特殊情况请致电 024-23255353 咨询)



使用网络版软件时，在软件安装完毕后，需要对服务器端及客户端电脑分别进行设置，具体操作步骤如下：

### 一、服务器端电脑设置（本地安全策略设置→Windows 防火墙设置→启用 Guest 账户）



#### （一）本地安全策略设置

##### 步骤 1：找到本地安全策略设置的位置

开始菜单→所有程序→控制面板→右侧查看方式点下拉框，选择“小图标”，找到“管理工具”→点开“管理工具”，找到“本地安全策略”，双击。具体操作界面如下：

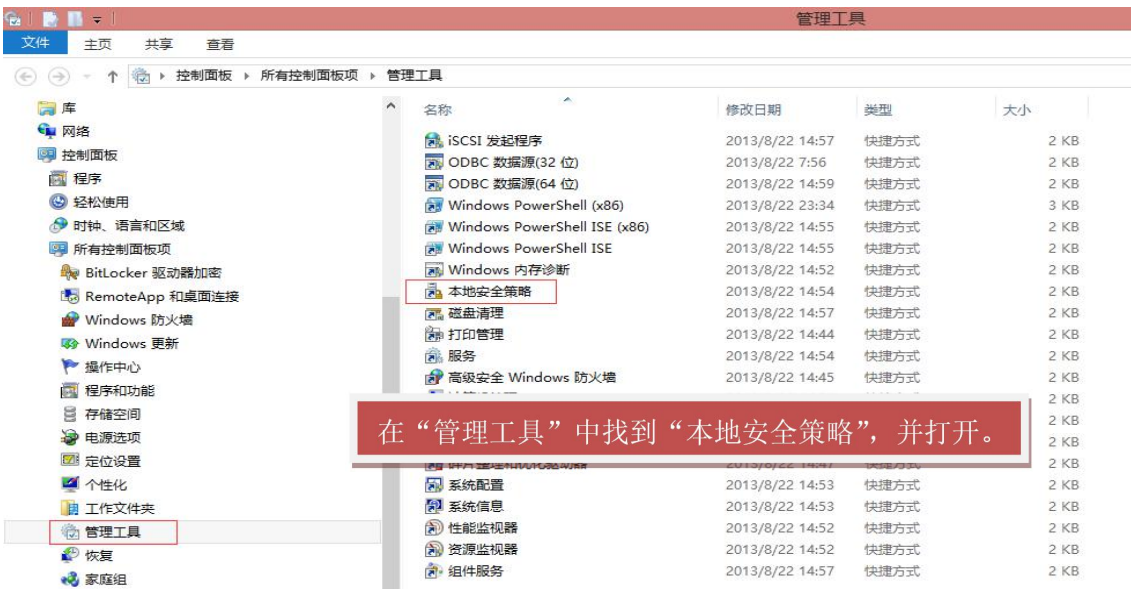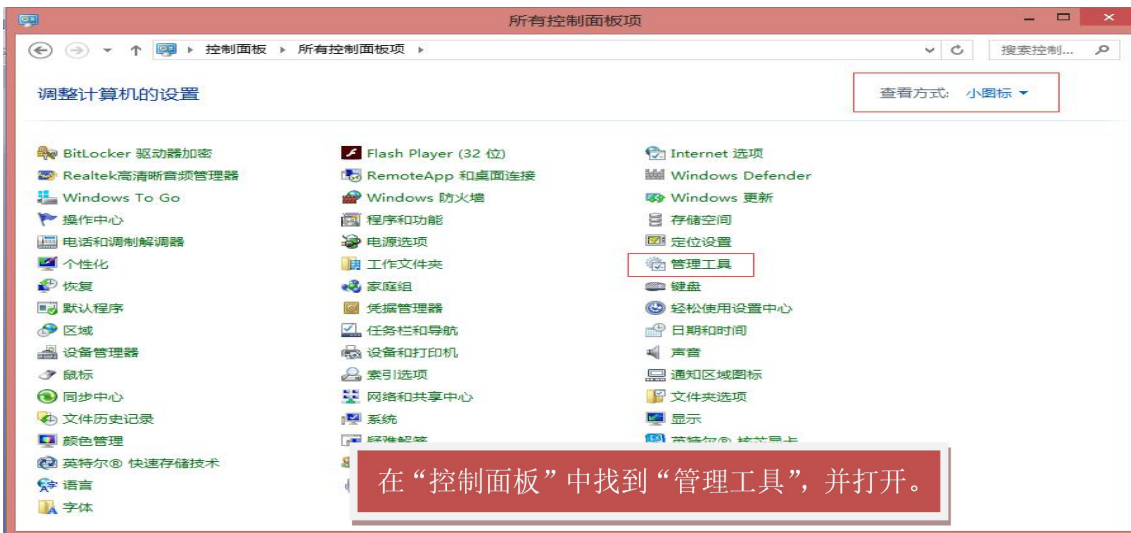




注意：如果按上述方法无法找到“本地安全策略”，则可以在开始菜单——运行——gpedit.msc，调出“本地组策略编辑器”窗口后再找到“本地策略”。具体截图如下：

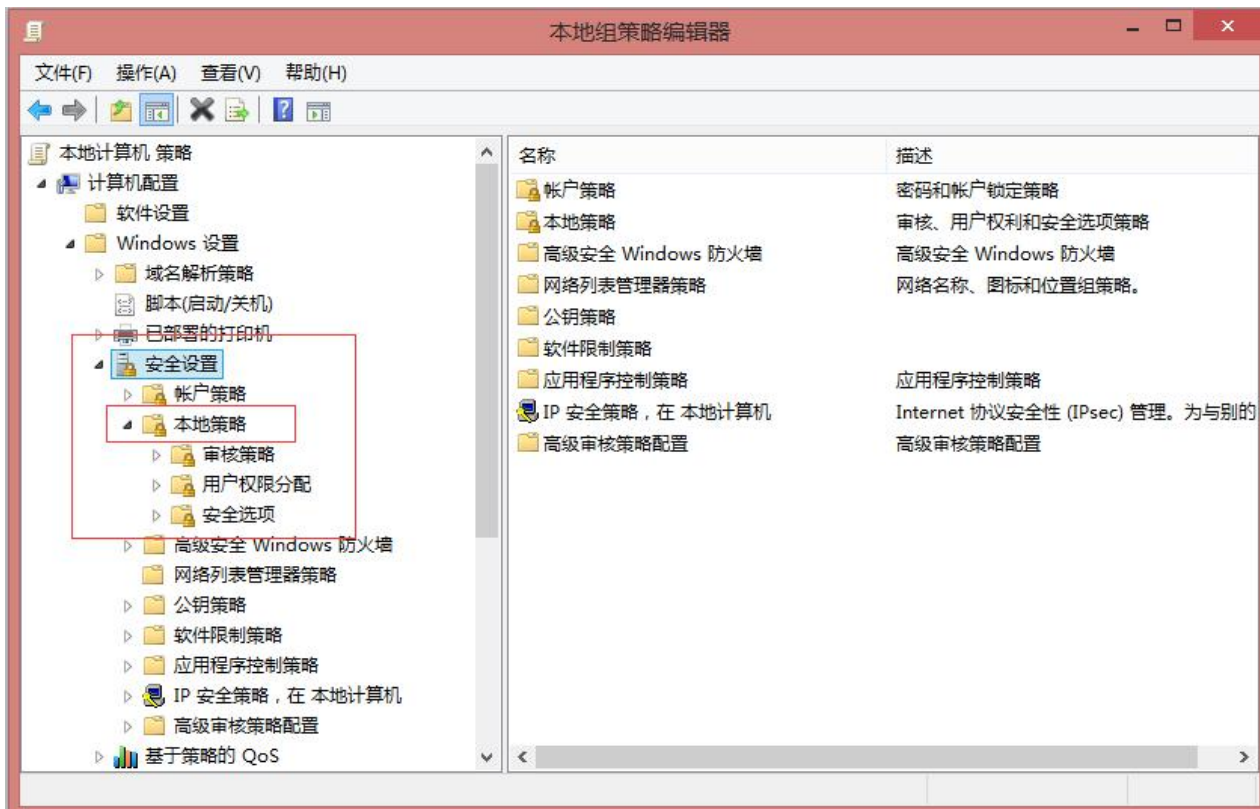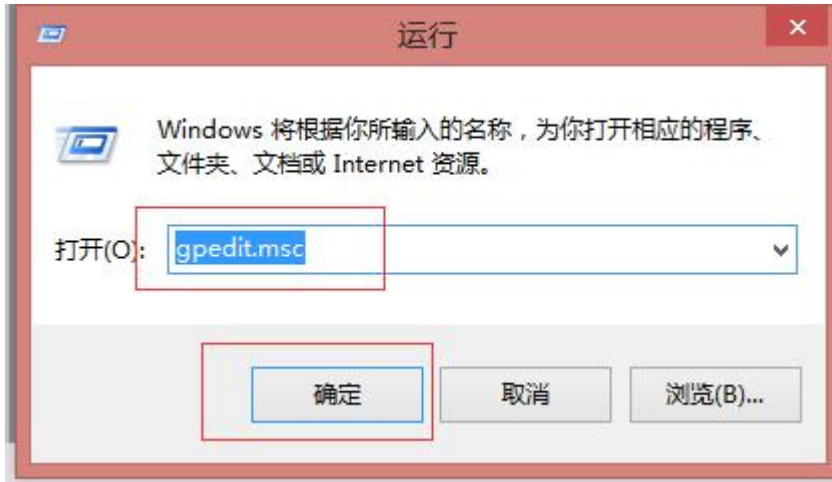


调出本地策略后，继续进行下一步操作。

**步骤 2：用户权限分配——从网络访问此计算机 属性设置**

本地安全策略打开后，在左侧点开“本地策略”， 双击“用户权限分配” →找到“从网络访问此计算机”并双击打开→点“添加用户或组” →点“高级” →点“立即查找” →选择“Guest” 账户，点“确定” →确认设置更改界面，点“是”。具体操作界面如下：

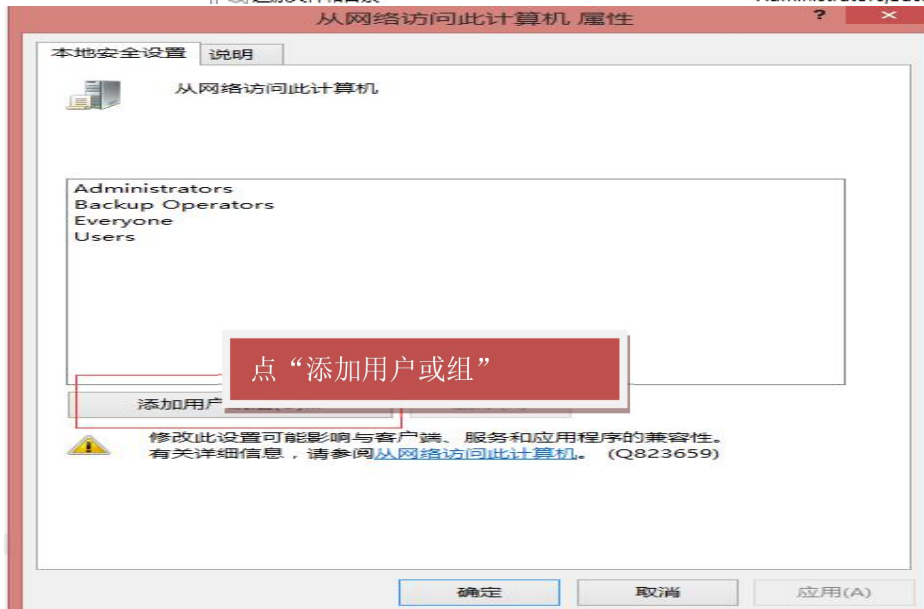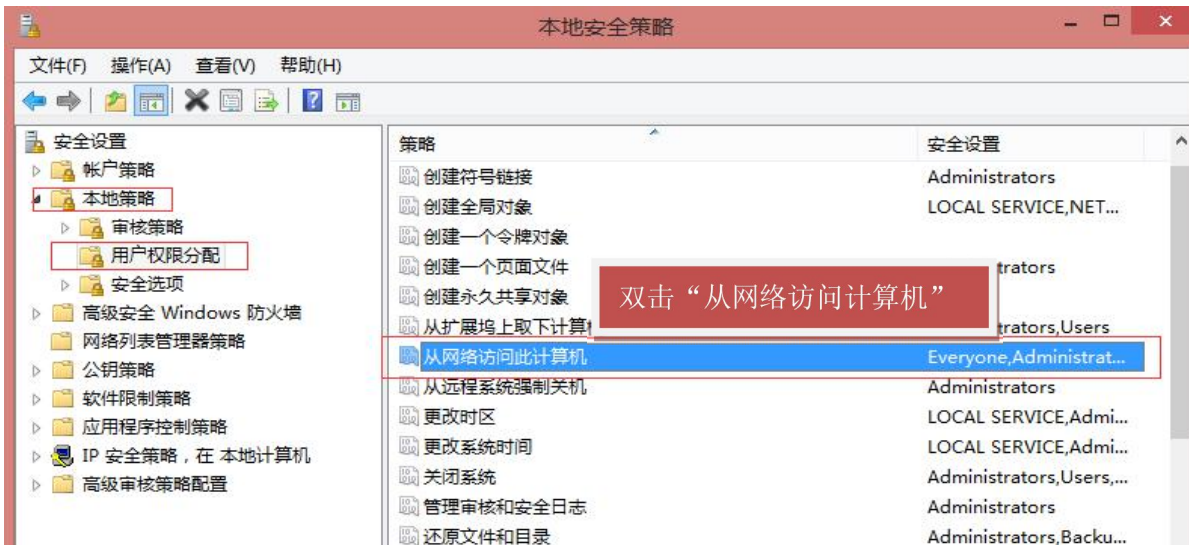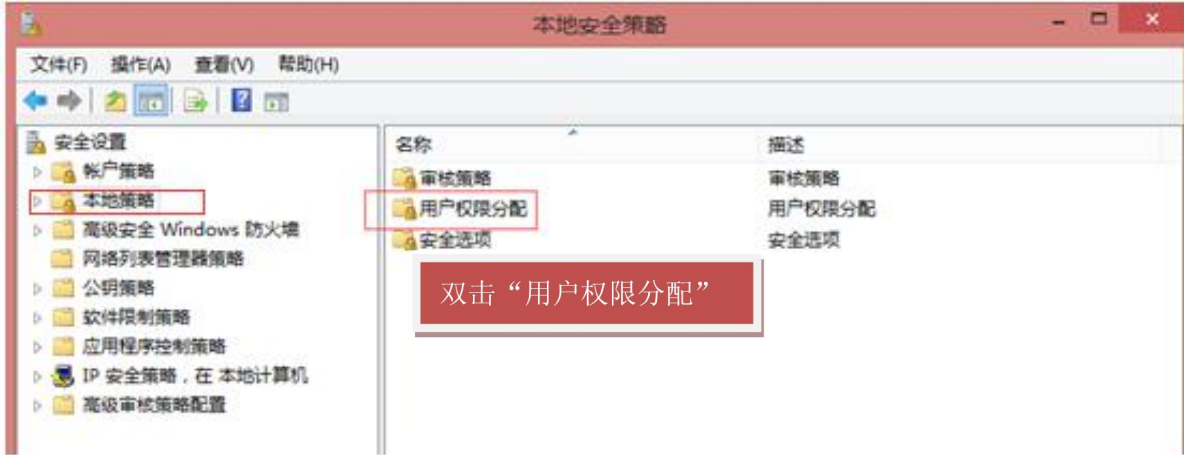


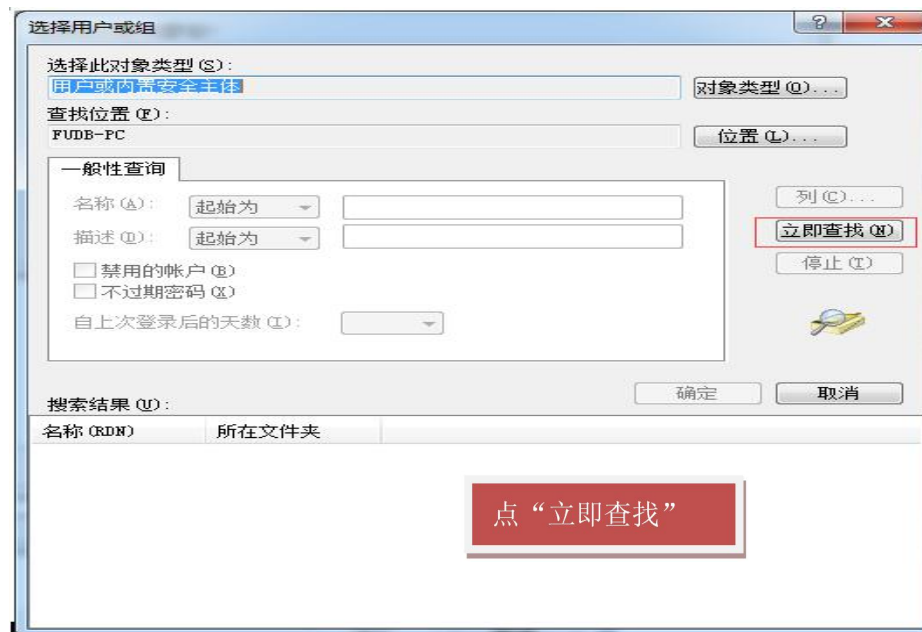

注意：如出现以下界面，请联系您公司的网管输入电脑在当前域的用户名和密码。



如果没有出现上述界面则继续以下操作。

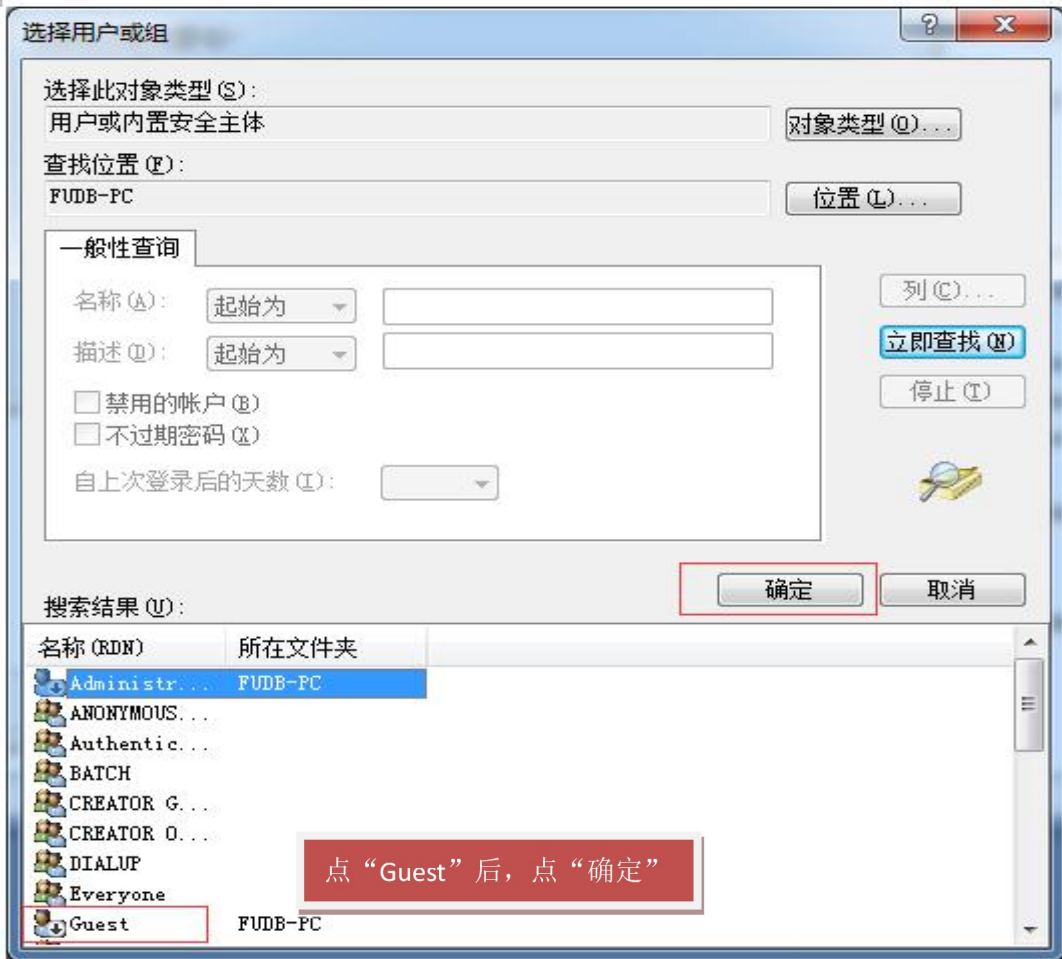

**步骤 3: 用户权限分配——拒绝从网络访问这台计算机 属性设置**


点开“本地策略”， 双击“用户权限分配”→找到“拒绝从网络访问这台计算机”并双击打开→点“Guest”，点“删除”，并“确定”。具体操作界面如下：



**步骤 4: 安全选项——网络访问：本地账户的共享和安全模型 属性设置**


点开“本地策略”， 双击“安全选项”，找到“网络访问：本地账户的共享和安全模型”，双击→点击下拉框，选择“经典-对本地用户进行身份验证，不改变其本来身份”，然后点击“确定”。具体操作界面如下：




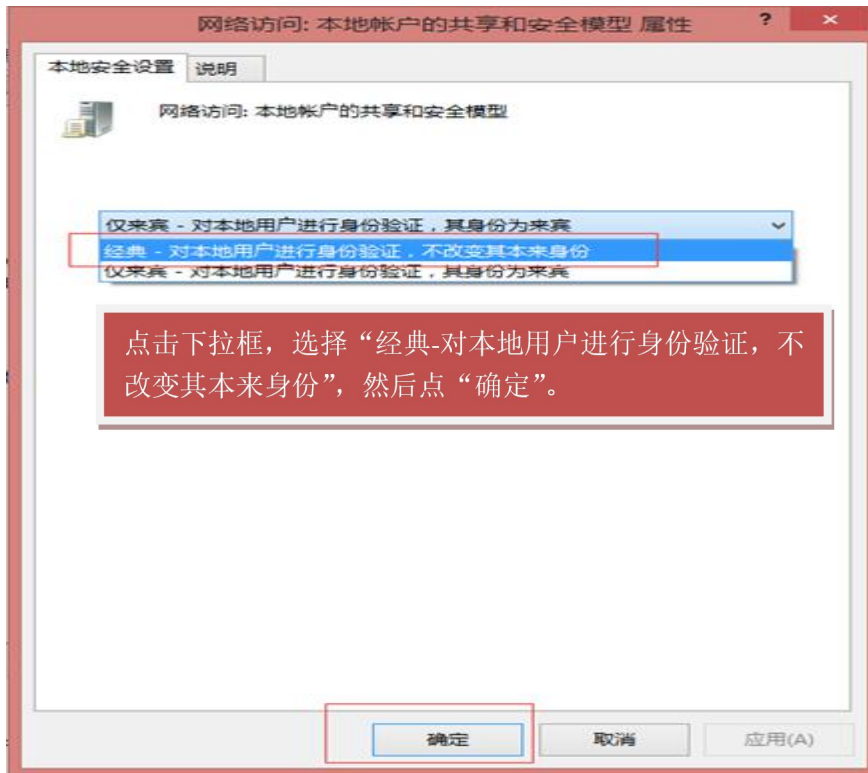

**步骤 5: 安全选项——账户: 使用空密码的本地帐户只允许进行控制台登录 属性设置**

点开“本地策略”， 双击“安全选项”→找到“账户: 使用空密码的本地帐户只允许进行控制台登录”， 双击→选择“已禁用”， 点“确定”。具体操作界面如下：


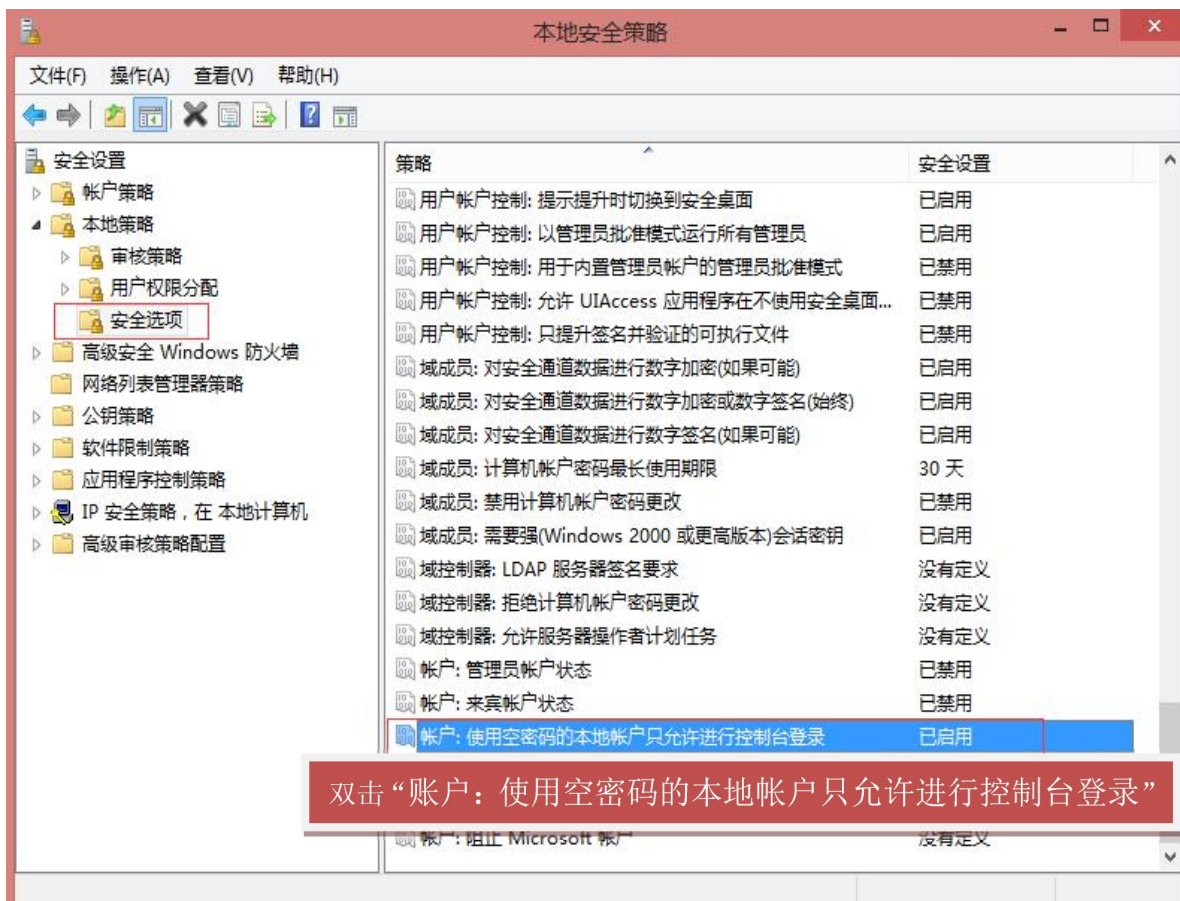


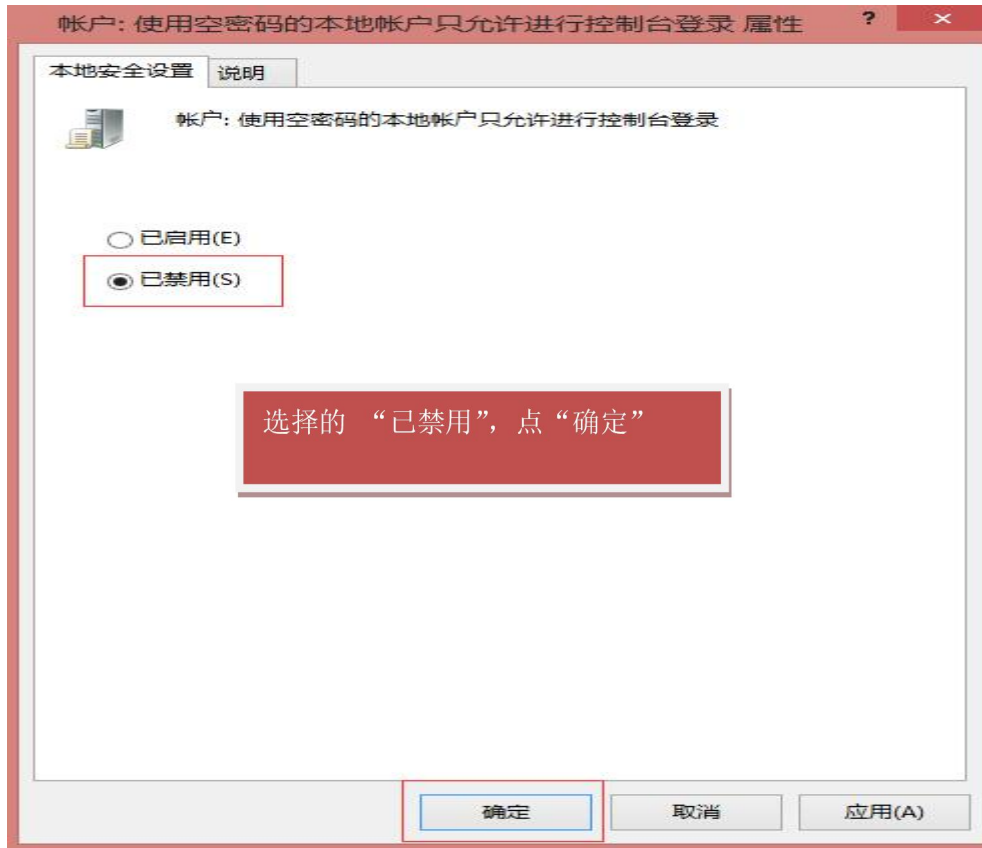

**(二) Windows 防火墙设置**

步骤 1: 开始菜单→控制面板→找到 windows 防火墙，点开→点“启用或关闭 windows 防火墙” →关闭所有 windows 防火墙。具体操作界面如下：



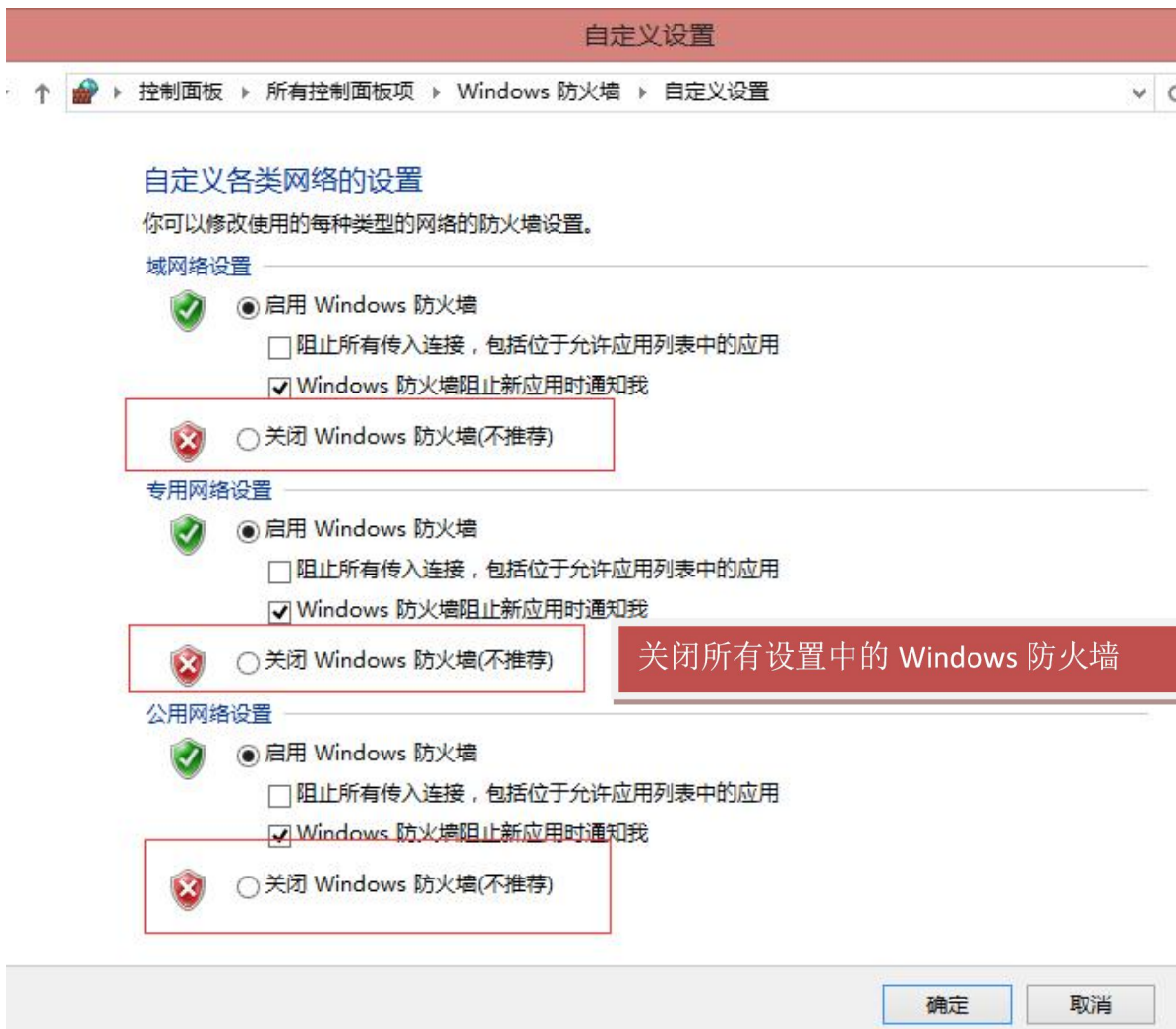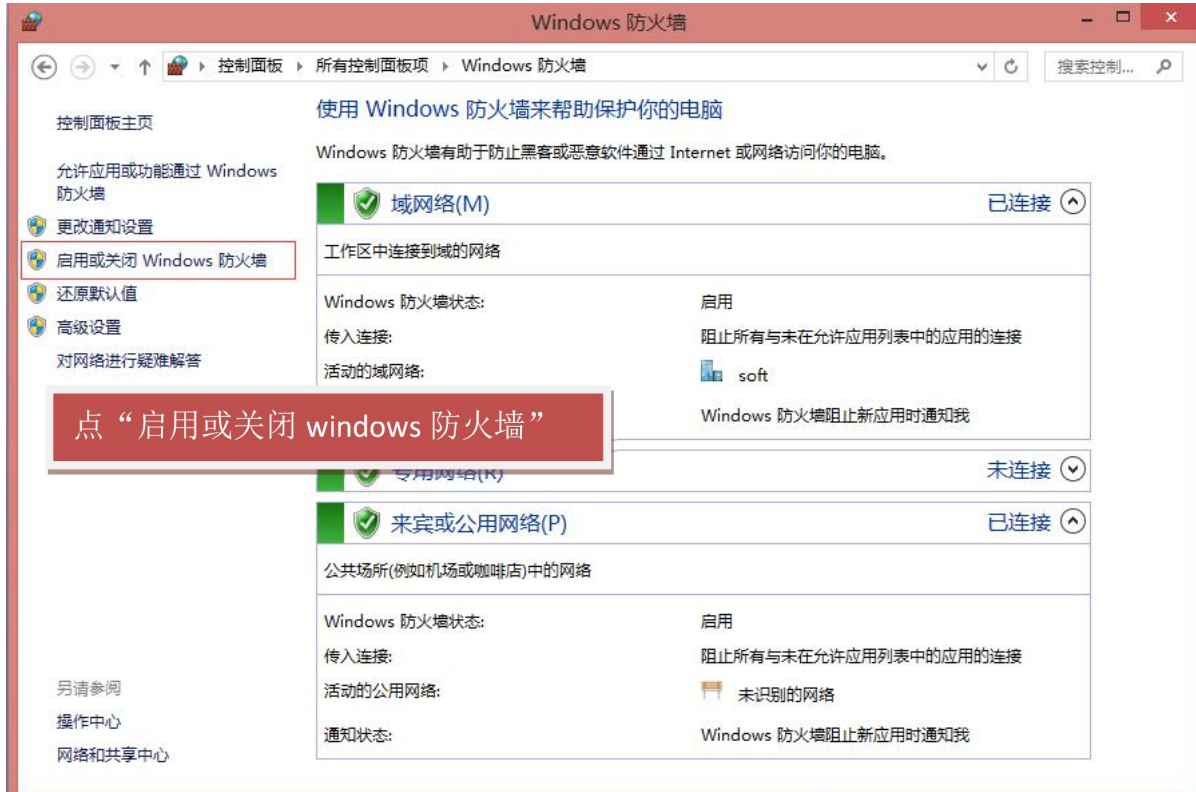


**(三) 启用 GUEST 账户**

开始菜单→所有程序→控制面板→找到“用户帐户”并打开→点击“管理其他账户”→启用 GUEST 账户。具体操作界面如下：



**(四) SQL2008 数据库的设置 (如果安装的是其他版本的 SQL 数据库, 请忽略此条内容)**

如果安装了 SQL2008,需要设置数据库的协议,点电脑左下角的开始—所有应用--.找到 Microsoft SQL Server 2008 R2--SQL SERVER 配置管理器,打开

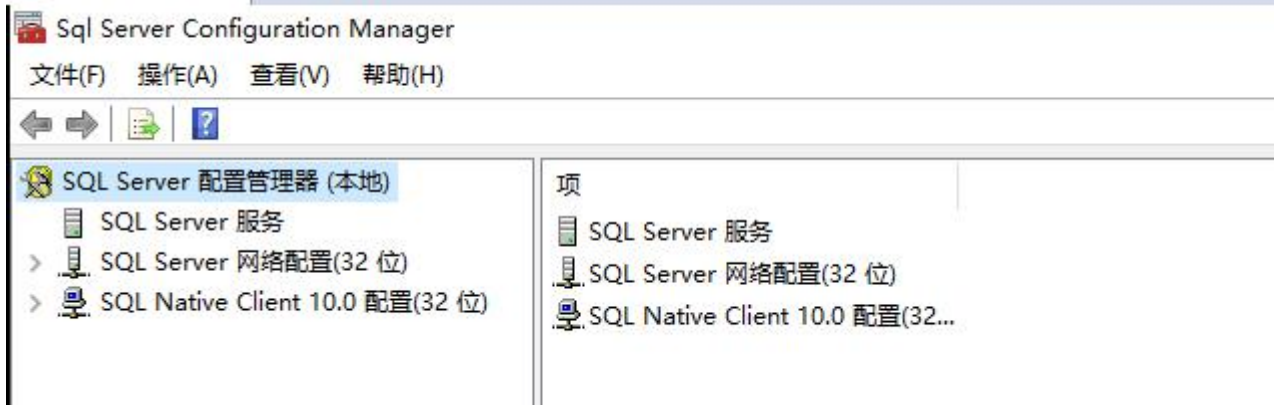

点击 SQL server 网络配置



双击 MSSQLSERVER 的协议



鼠标右键点击 TCP/IP,选启用.

鼠标右键点击 VIA ,选启用.

设置好后点 SQL server 服务



双击 SQL server (MSSQLSERVER)




点重新启动


然后确定 完成设置

## 二、客户端电脑设置（设置数据源）



步骤 1：开始菜单→所有程序→控制面板→管理工具→数据源（ODBC）→选择数据源→选择服务器→修改数据库登陆 ID 及密码→设置默认数据源。具体操作界面如下：

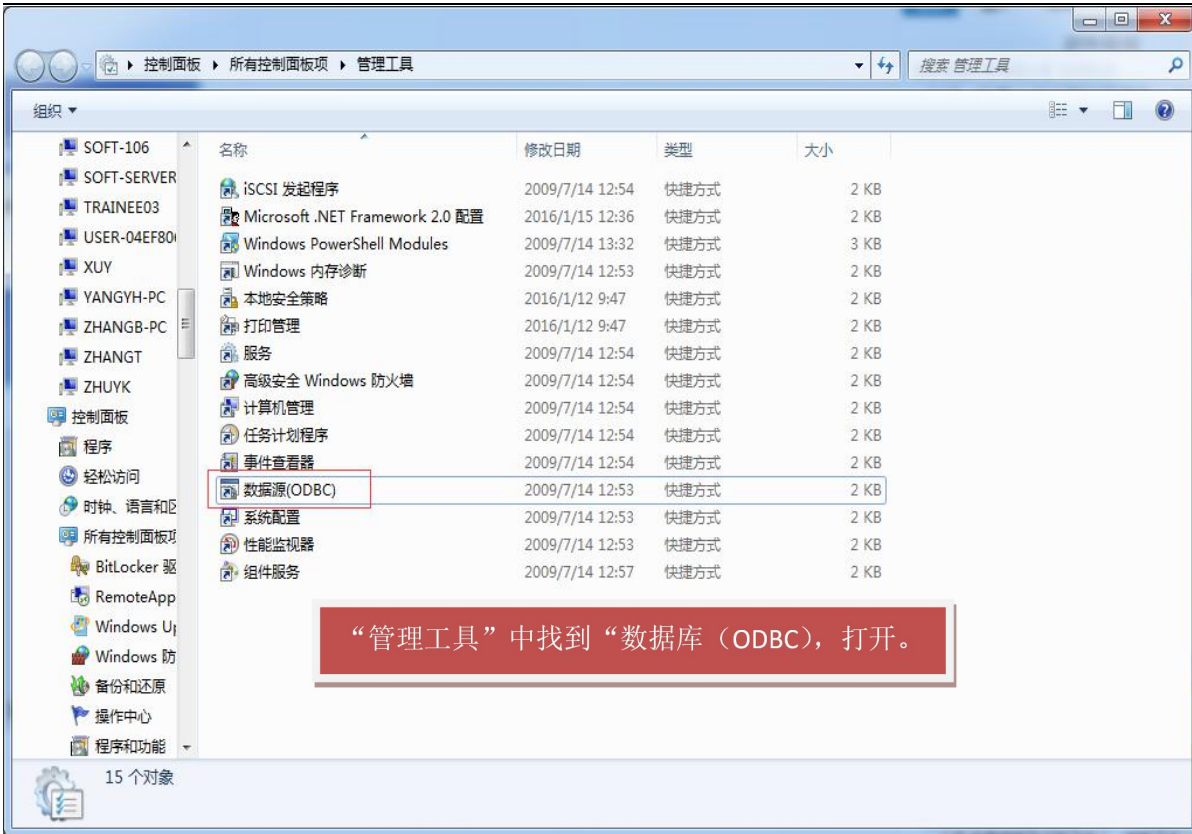

如果显示两个数据源如下图，则选择 ODBC 数据源（32 位）。

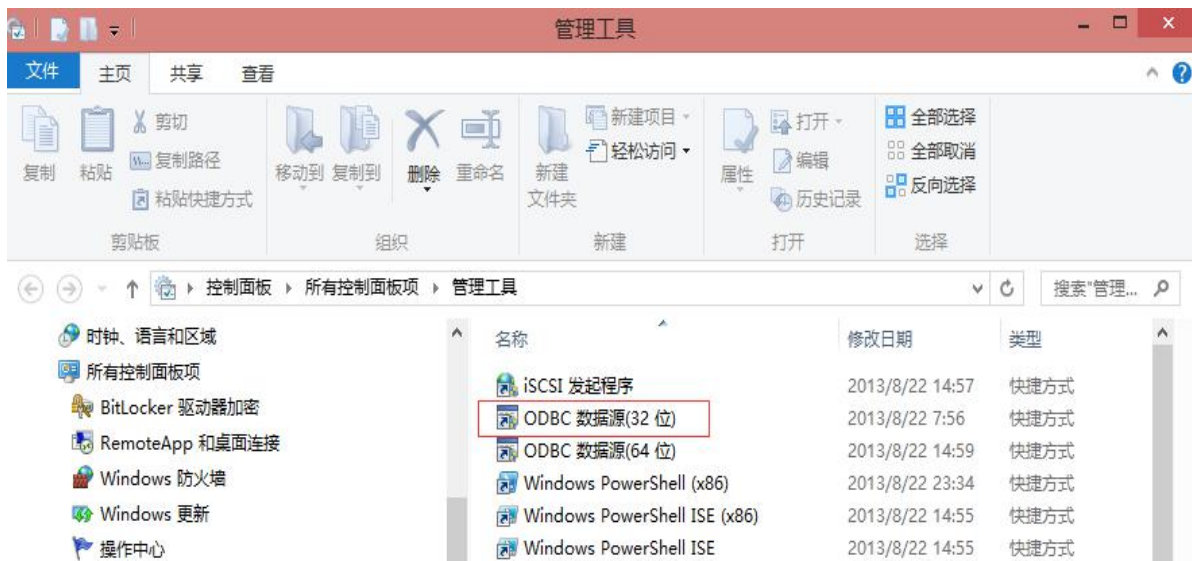

或：“管理工具”中 选择 ODBC 数据源（32 位），打开。

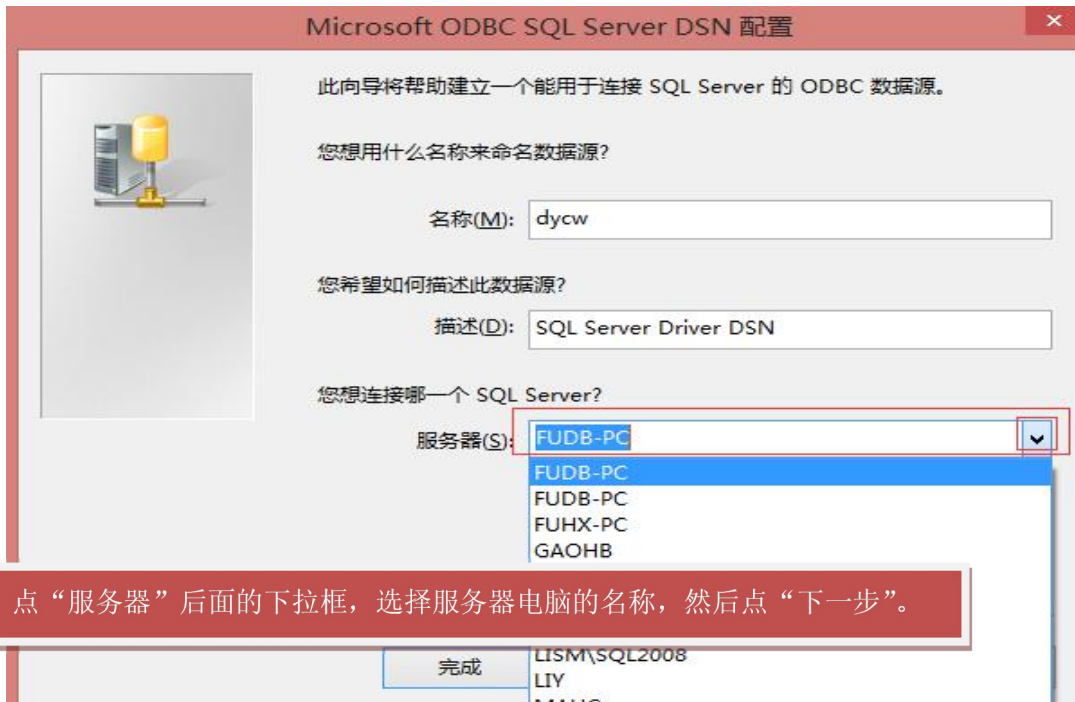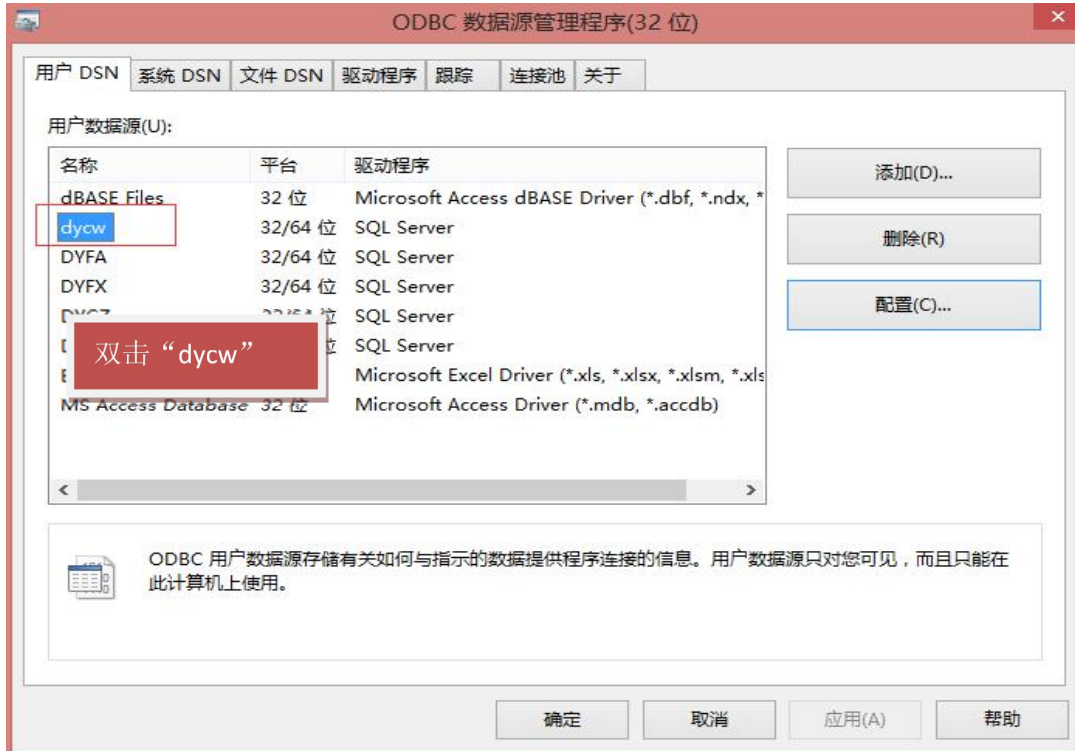

注意：1、局域网情况下，如果下拉框中找不到服务器端电脑的名称，有以下几种情况：（1）该客户端电脑与服务器端电脑不在一个局域网内、网络不通、或者服务器端的网络设置不正确。这时需要重新检查确认服务器端电脑的网络设置是否正确，局域网是否连通。确认设置无误且网络连通后，再重新选择。（2）服务器端电脑与客户端电脑在同一局域网内，但不在同一个工作组里，下拉框中也不会显示，此时可以直接输入服务器电脑名称进行选择。2、局域网情况下，也可以通过输入路由器 IP 地址进行连接。3、如果是广域网连接，则需要服务器一栏录入服务器电脑的固定 IP 地址或域名，然后点击下一步。



将登录 ID 改成 SA，密码如果安装蓝海灵豚软件之前没有设置过 SQL Server 密码，则为 BOSD。如果安装蓝海灵豚软件之前设置过 SQL Server 密码，则输入之前设置的密码。





出现上面的界面，说明数据源连接成功了。

**注意：**如果输入 SA 及密码后，出现下面的界面，说明服务器连接不成功，需要再重新确认服务器端的设置是否正确，SA 密码是否正确。

